



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

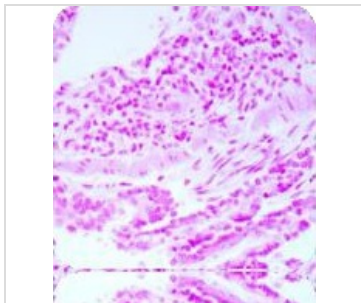
www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Nuclear Fast Red counterstain

Cat No. GTX73305**Application** IHC-P**Package**
50 ml**PRODUCT****Product Description** Nuclear Fast Red Counterstain**APPLICATION****Application Note**

Seven Step Procedure: 1.After the end of the chromogen incubation, rinse slides with distilled water and drain.2.Introduce the Nuclear Fast Red.3.Incubate the slides for 1-2 min. at room temperature.4.Drain off the Nuclear Fast Red and wash slides several times with distilled water. 5.Dehydrate the slides by passing them through graded alcohols.6.Bring the slides to xylene or xylene substitute clearing agent.7.Mount with Clarion (Cat. No. GTX73339, GTX73340) or other organic solvent based mounting medium.

PROPERTIES**Storage** Store at room temperature.**Note** For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.**DATA IMAGES****GTX73305 IHC-P Image**

IHC-P analysis of human tonsil using Nuclear Fast Red counterstain without antibody.

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).