



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC Handels GmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

BZiPAR

Cat. No.:	HY-D1685
CAS No.:	254451-46-2
Molecular Formula:	C ₇₀ H ₈₈ Cl ₂ N ₁₄ O ₁₃
Molecular Weight:	1404.44
Target:	Fluorescent Dye
Pathway:	Others
Storage:	-20°C, protect from light, stored under nitrogen * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)

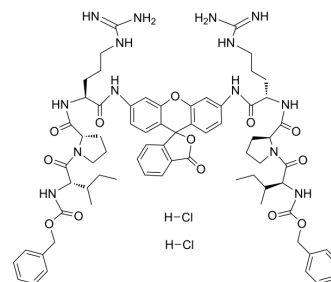

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	BZiPAR is a fluorescent probe. BZiPAR also is a substrate of trypsin that becomes fluorescent after cleavage by the protease [1].
In Vitro	Guidelines (Following is our recommended protocol. This protocol only provides a guideline, and should be modified according to your specific needs). Confocal Imaging of Trypsinogen Activation: 1. Incubate the cells according to your normal protocol. 2. Isolate clusters of acinar cells. 3. Incubate acini in extracellular solution containing 100 μM BZiPAR. 4. BZiPAR were excited with a 488-nm laser line; emission was collected in the 508- to 530-nm band for cleaved BZiPAR. MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

REFERENCES

[1]. Mark W Sherwood, et al. Activation of trypsinogen in large endocytic vacuoles of pancreatic acinar cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Mar 27;104(13):5674-9.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA