



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com


www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic)



4-Ethynylanisole

Cat. No.:	HY-W004104		
CAS No.:	768-60-5		
Molecular Formula:	C ₉ H ₈ O		
Molecular Weight:	132.16		
Target:	Biochemical Assay Reagents		
Pathway:	Others		
Storage:	Pure form	-20°C	3 years
		4°C	2 years
	In solvent	-80°C	6 months
		-20°C	1 month

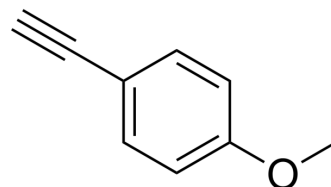

SOLVENT & SOLUBILITY

In Vitro	DMSO : 100 mg/mL (756.66 mM; Need ultrasonic)					
	Preparing Stock Solutions	Solvent Concentration	Mass	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM		7.5666 mL	37.8329 mL	75.6659 mL
		5 mM		1.5133 mL	7.5666 mL	15.1332 mL
		10 mM		0.7567 mL	3.7833 mL	7.5666 mL
Please refer to the solubility information to select the appropriate solvent.						
In Vivo	1. Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 40% PEG300 >> 5% Tween-80 >> 45% saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (18.92 mM); Clear solution					
	2. Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (18.92 mM); Clear solution					
	3. Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (18.92 mM); Clear solution					

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	4-Ethynylanisole is a biochemical reagent that can be used as a biological material or organic compound for life science related research. 4-Ethynylanisole is a click chemistry reagent, it contains an Alkyne group and can undergo copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) with molecules containing Azide groups.
In Vitro	4-Ethynylanisole was used in the synthesis of photo luminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4+2] cycloaddition. MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA