



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

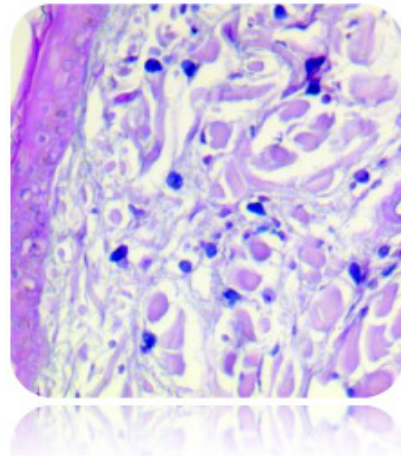
Astra Blue Solution

Description: Astra Blue Solution is designed to stain mast cells bright blue. This reagent can be used in combination with various counterstains to provide contrast.

<u>Tissue Component:</u>	<u>Staining Color/Pattern:</u>
Mast Cells:	Blue

Uses/Limitations: Not to be taken internally.
 For In-Vitro Diagnostic use only.
 Histological applications.
 Do not use if reagents become cloudy.
 Do not use past expiration date.
 Use caution when handling reagents.
 Non-Sterile.

Positive Control Tissue: Any well fixed paraffin embedded or frozen tissue section cut 3-6 microns.



Ordering Information and Current Pricing at www.scytek.com


Availability:	<u>Item #</u>	<u>Volume</u>
	AST125	125 ml
	AST500	500 ml
	AST999	1000 ml


Storage Conditions: 18-25° Centigrade

Precautions: Avoid contact with skin and eyes.
 Harmful if swallowed.
 Follow all Federal, State, and local regulations regarding disposal.

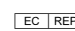
Procedure:

1. Deparaffinize sections if necessary and hydrate to distilled water.
2. Stain tissue section with Astra Blue Solution for 30 minutes with frequent agitation.
3. Rinse quickly in 2 changes of distilled water.
4. Dehydrate quickly through 3 changes of absolute alcohol.
5. Clear, and mount in synthetic resin.

Storage: 18° C  25° C

 ScyTek Laboratories, Inc.
 205 South 600 West
 Logan, UT 84321
 U.S.A.

 EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
 Molsnstraat 15
 2513 BH Hague, The Netherlands