



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC Handels GmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Light Green Solution


Description: Light Green Solution is intended for use in histological applications as a general counterstain. When used correctly, various shades of green can be obtained to aid in visualization of tissue components.

Cytoplasm: Green
 Nuclei: Green

Uses/Limitations: Not to be taken internally.
 For In-Vitro Diagnostic use.
 Histological applications.
 Do not use if reagents become cloudy.
 Do not use past expiration date.
 Use caution when handling reagents.
 Non-Sterile.

Control Tissue: Any fixed or frozen tissue.
 Cell Smear.
 Cytocentrifuge.

Ordering Information and Current Pricing at www.scytek.com

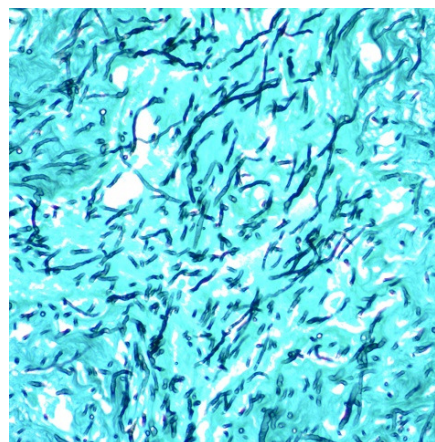

Lung tissue containing fungal material. Using Light Green Solution as a counterstain to GMS Silver Stain. 400X Magnification.

Availability:

<u>Item #</u>	<u>Volume</u>	<u>Storage</u>
LGA030	30 ml (Dropper)	18-25°C
LGA125	125 ml	
LGA500	500 ml	
LGA999	1000 ml	
LGA3800	1 Gallon	

Precautions: Avoid contact with skin and eyes.
 Harmful if swallowed.
 Follow all Federal, State, and local regulations regarding disposal.

Procedure:

1. Deparaffinize sections if necessary and hydrate to distilled water.
2. Rinse slide in distilled water.
3. Stain slide in Light Green Solution for 2 minutes.
4. Rinse slide using absolute alcohol.
5. Dehydrate in 2 changes of absolute alcohol, clear, and mount in synthetic resin.

Storage: 18° C  25° C

 ScyTek Laboratories, Inc.
 205 South 600 West
 Logan, UT 84321
 U.S.A.

CE

EC REP
 Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague, The Netherlands